

**MoliCare Slip normal plus Gr. 3,
MoliCare Slip extra,
MoliCare Slip extra plus,
MoliCare Slip super,
MoliCare Slip super plus**



Spez.-Nr.: D 3.2147
Abteilung: CMO-ID
Datum: 2016-09-05

1. Allgemeine Produktbeschreibung

Moderner Inkontinenz-Slip mit 3-lagigem, anatomisch geformtem Saugkern, quick-dry Verteilerauflage, flüssigkeitsabweisenden, weichen und geschwungenen Innenbündchen, elastischem Beinabschluss, textilem Backsheet, Nässeindikator, atmungsaktiver Vliesabdeckung im Hüftbereich und wiederverschließbaren Vliestapes mit Klettband. Durch einen speziell entwickelten Saugkörper bietet MoliCare Slip bestmöglichen Rundum-Schutz, eine hohe Saugkraft und Speicherleistung. MoliCare Slip ist dermatologisch getestet, schützt vor Rücknässung und schont die empfindliche Haut.

MoliCare Slip maxi Größe 1, 2 und 3 (D 3.2148) siehe entsprechendes Datenblatt.

Produkteinstufung gemäß EG-Rahmenrichtlinie für unsterile Medizinprodukte der Klasse 1.

2. Anwendung

MoliCareSlip eignet sich besonders für Fälle der mittleren bis schweren Harn- und/oder Stuhlinkontinenz sowie für hochgradig pflegebedürftige Patienten. MoliCare Slip verleiht auch mobilen Patienten größtmögliche Sicherheit.

3. Aufmachung

	in den Größen				
	0 = extra small	1 = small	2 = medium	3 = large	4 = extra large
MoliCare Slip normal plus				•	
MoliCare Slip extra	•	•	•	•	•
MoliCare Slip extra plus	•	•	•	•	•
MoliCare Slip super		•	•	•	
MoliCare Slip super plus		•	•	•	

**MoliCare Slip normal plus Gr. 3,
MoliCare Slip extra,
MoliCare Slip extra plus,
MoliCare Slip super,
MoliCare Slip super plus**



Spez.-Nr.: D 3.2147

Abteilung: CMO-ID

Datum: 2016-09-05

4. Produkteigenschaften

Material:

- Wäscheschutz: blaues Vlies-Folien-Laminat, gelb, grün, blau, pink, violett, bedruckt
- Saugkörper (3-lagig):
 1. Lage: 100 % elementarchlorfrei gebleichter Zellstoff
 2. Lage: Zellstoff-/ SAP-Gemisch
 3. Lage: Curly Fiber
- Kleber Schmelzkraftkleber
- Vlies: Polypropylen – Vlies, hydrophil, weiß
- Vlies Seitenbereich: Polypropylen - Vlies, hydrophob, atmungsaktiv, weiß
- Innenbündchen: Polypropylen - Vlies, hydrophob, weiß
- Elastikfäden: Elastikfäden für Beinabschluss und Cuff
- Tape: Vliestape mit Klettband, wiederverschließbar

**MoliCare Slip normal plus Gr. 3,
MoliCare Slip extra,
MoliCare Slip extra plus,
MoliCare Slip super,
MoliCare Slip super plus**




Spez.-Nr.: D 3.2147

Abteilung: CMO-ID

Datum: 2016-09-05

5. Produktzeichnung

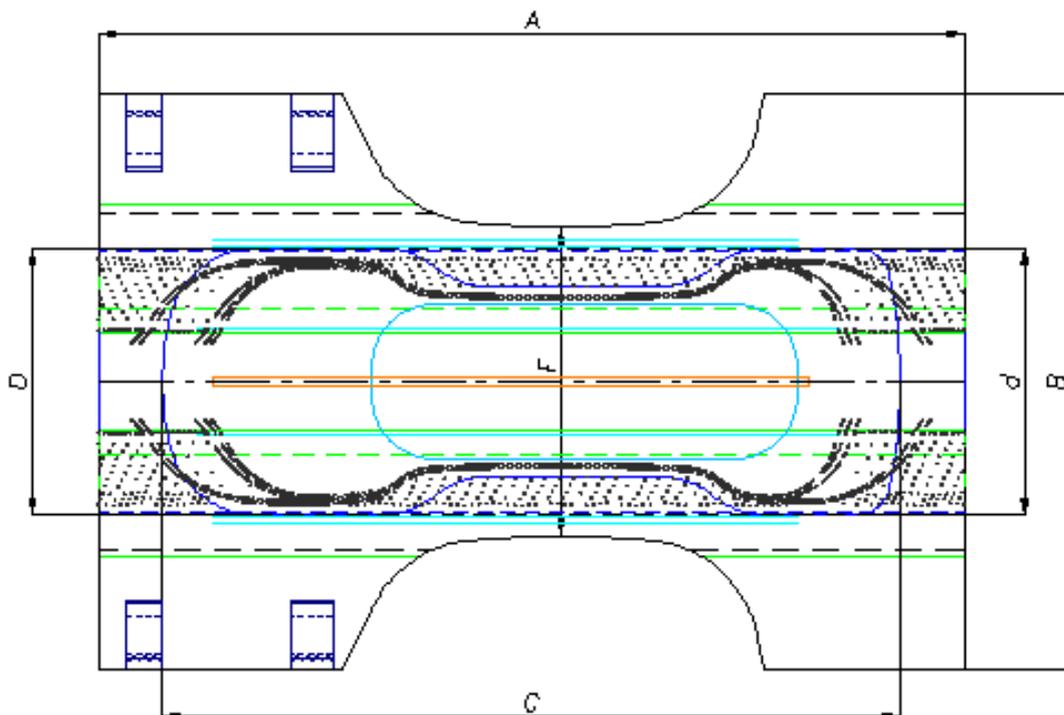

Abmessungen: [mm]		Größe 0 extra small
Gesamtlänge:	A	610 ± 20
Gesamtbreite Bauchseite:	B	410 -20/+40
Gesamtbreite Schritt:	F	220 ± 10
Saugkörperlänge:	C	520 ± 30
Saugkörperbreite Bauchseite	d	190 ± 10
Saugkörperbreite Tapeseite:	D	190 ± 10


**MoliCare Slip normal plus Gr. 3,
MoliCare Slip extra,
MoliCare Slip extra plus,
MoliCare Slip super,
MoliCare Slip super plus**



Spez.-Nr.: D 3.2147

Abteilung: CMO-ID

Datum: 2016-09-05

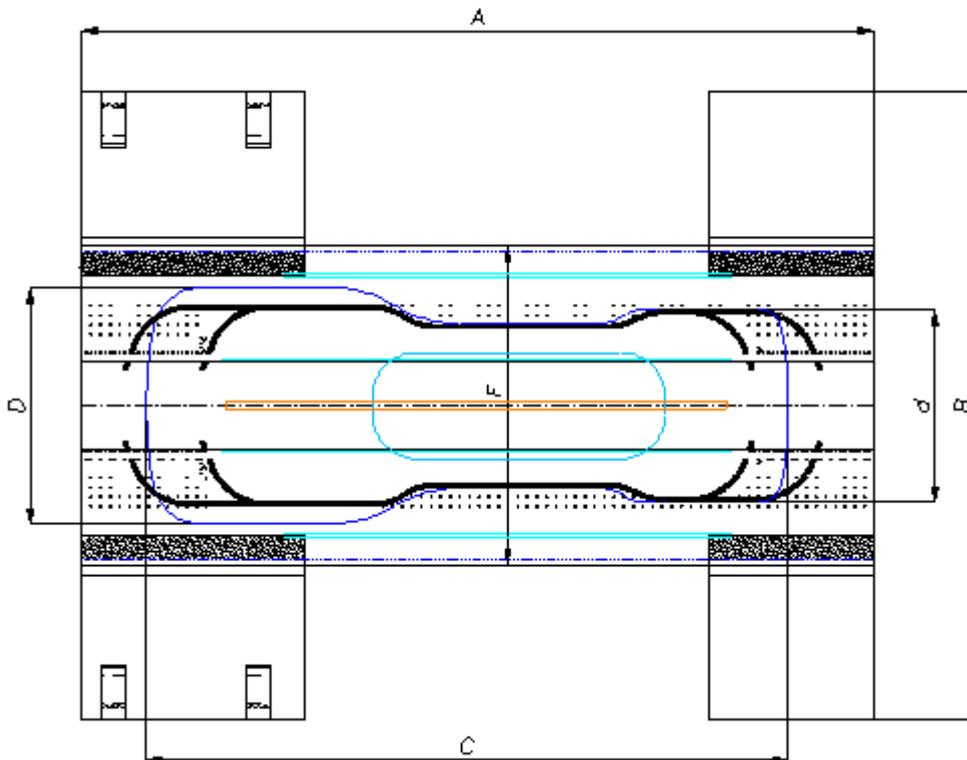

Abmessungen: [mm]		Größe 1 small	Größe 2 medium	Größe 3 large
Gesamtlänge:	A	700 ± 20	815 ± 20	980 ± 20
Gesamtbreite Bauchseite:	B	490 -20/+40	650 -20/+40	780 -20/+40
Gesamtbreite Schritt:	F	240 ± 10	320 ± 10	320 ± 10
Saugkörperlänge:	C	540 ± 30	660 ± 30	780 ± 40
Saugkörperbreite Bauchseite	d	190 ± 10	200 ± 10	200 ± 10
Saugkörperbreite Tapeseite:	D	190 ± 10	245 ± 10	265 ± 10


MoliCare Slip normal plus Gr. 3,
MoliCare Slip extra,
MoliCare Slip extra plus,
MoliCare Slip super,
MoliCare Slip super plus



Spez.-Nr.: D 3.2147

Abteilung: CMO-ID

Datum: 2016-09-05

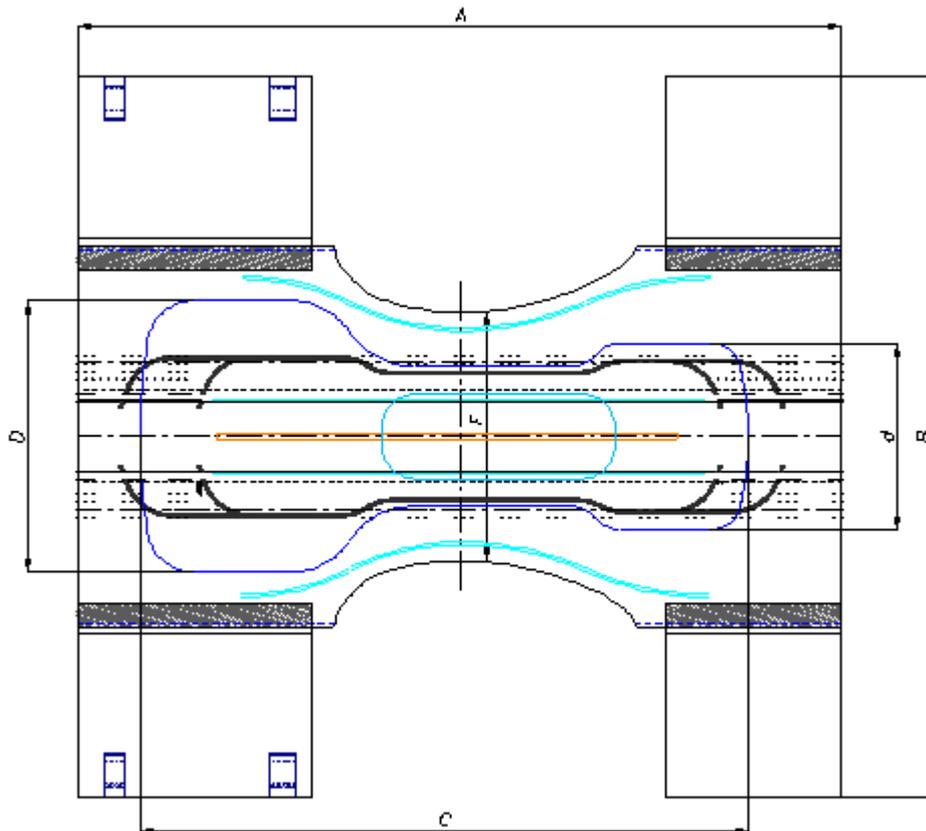

Abmessungen: [mm]		Größe 4 extra large
Gesamtlänge:	A	980 ± 20
Gesamtbreite Bauchseite:	B	930 -20/+40
Gesamtbreite Schritt:	F	320 ± 10
Saugkörperlänge:	C	780 ± 40
Saugkörperbreite Bauchseite	d	240 ± 10
Saugkörperbreite Tapeseite:	D	350 ± 10

**MoliCare Slip normal plus Gr. 3,
MoliCare Slip extra,
MoliCare Slip extra plus,
MoliCare Slip super,
MoliCare Slip super plus**



Spez.-Nr.: D 3.2147
Abteilung: CMO-ID
Datum: 2016-09-05

6. Produktanforderungen

MoliCare Slip normal plus

Prüfmerkmal:		Größe 1 small	Größe 2 medium	Größe 3 large
Gesamtgewicht:*	[g]			100
1. Einsickerzeit:**	[s]			max. 70
2. Einsickerzeit:**	[s]			max. 100
1. Rücknässung:**	[g]			max. 0,4
2. Rücknässung:**	[g]			max. 5,0

MoliCare Slip extra

Prüfmerkmal:		Größe 0 extra small	Größe 1 small	Größe 2 medium	Größe 3 large	Größe 4 extra large
Gesamtgewicht:*	[g]	56	60	83	104	119
1. Einsickerzeit:**	[s]	max. 80	max. 80	max. 70	max. 70	max. 70
2. Einsickerzeit:**	[s]	max. 110	max. 110	max. 100	max. 100	max. 100
1. Rücknässung:**	[g]	max. 0,4	max. 0,4	max. 0,4	max. 0,4	max. 0,4
2. Rücknässung:**	[g]	max. 5,0	max. 5,0	max. 5,0	max. 5,0	max. 5,0

MoliCare Slip extra plus

Prüfmerkmal:		Größe 0 extra small	Größe 1 small	Größe 2 medium	Größe 3 large	Größe 4 extra large
Gesamtgewicht:*	[g]	62	65	89	109	127
1. Einsickerzeit:**	[s]	max. 80	max. 80	max. 70	max. 70	max. 70
2. Einsickerzeit:**	[s]	max. 110	max. 110	max. 100	max. 100	max. 100
1. Rücknässung:**	[g]	max. 0,4	max. 0,4	max. 0,4	max. 0,4	max. 0,4
2. Rücknässung:**	[g]	max. 5,0	max. 5,0	max. 5,0	max. 5,0	max. 5,0

**MoliCare Slip normal plus Gr. 3,
MoliCare Slip extra,
MoliCare Slip extra plus,
MoliCare Slip super,
MoliCare Slip super plus**



Spez.-Nr.: D 3,2147
Abteilung: CMO-ID
Datum: 2016-09-05

MoliCare Slip super

Prüfmerkmal:		Größe 1 small	Größe 2 medium	Größe 3 large
Gesamtgewicht:*	[g]	68	89	106
1. Einsickerzeit:**	[s]	max. 60	max. 60	max. 60
2. Einsickerzeit:**	[s]	max. 90	max. 90	max. 90
1. Rücknässung:**	[g]	max. 0,4	max. 0,4	max. 0,4
2. Rücknässung:**	[g]	max. 5,0	max. 5,0	max. 5,0

MoliCare Slip super plus

Prüfmerkmal:		Größe 1 small	Größe 2 medium	Größe 3 large
Gesamtgewicht:*	[g]	72	98	115
1. Einsickerzeit:**	[s]	max. 120	max. 120	max. 120
2. Einsickerzeit:**	[s]	max. 200	max. 200	max. 200
1. Rücknässung:**	[g]	max. 0,4	max. 0,4	max. 0,4
2. Rücknässung:**	[g]	max. 5,0	max. 5,0	max. 5,0

* Toleranz $\pm 10\%$ (entspricht ± 3 s)

** mit 100 oder 200 ml Kochsalzlösung (abhängig von Zellstoff und SAP Gehalt)

**MoliCare Slip normal plus Gr. 3,
MoliCare Slip extra,
MoliCare Slip extra plus,
MoliCare Slip super,
MoliCare Slip super plus**



Spez.-Nr.: D 3.2147
Abteilung: CMO-ID
Datum: 2016-09-05

7. Kennzeichnung

Chargenschlüssel mit 9-stelligem Code und vorangestelltem Produktionszeitpunkt.

z.B.: 1221046 – **500102822**

Produktionszeitpunkt			LOT-Code					
Tag	Stunde	Minute		Jahr 201X / 202X	Interner Schlüssel	Interner Schlüssel	Interner Schlüssel	Kumulierte Prüfziffer
***	**	**	LOT	X	XXX	XX	XX	X

8. Verpackung

MoliCare Slip normal plus, extra, extra plus, super und super plus in Polyethylen - Presspackbeutel verpackt; Transportkarton nach DIN, mit Klebestreifen verschlossen; Palettierung auf Europalette.

05. September 2016



PAUL HARTMANN AG
- Produktentwicklung Inkontinenz Management (CMO-ID) -